

うるおいと温熱の、やさしいぬくもり。

肌にやさしいほっとなうるおいで蒸しながら、

『植物性炭素繊維』の遠赤外線で体の内側までぽかぽかに。

生命のミネラル源『サンゴ砂』の自然で均一な温熱が、

体をやさしく温めます。



※蒸気と温熱はイメージです。

遠赤蒸しマット

ULMO
ウルモ



まだまだあります。
MTG

蒸されて心も癒されて、くつろぎながら温熱ケア。

くつろぎたいときは低温でじっくりと、しっかり温めたいときは高温の使用がおすすめです。

体の「冷え」は健康にも美容にも大敵。意識して体を温めることはとても大切です。

「ウルモ」は遠赤外線と蒸気温熱で効率よく体を温めて

温熱習慣をサポート。天然素材と温熱でやさしく体を温めます。



※睡眠中のご使用はおやめください。

腰周りをやさしく包んで、温熱と蒸気で温めます。

腰



! 肌に直接当てずに、必ず衣服の上からご使用ください。



ひざ掛け感覚で足を包み込み、下半身から効率よく体を温めます。



おなか周りを包み込むようにかけて、おなかをじっくり温めます。



指先からひじ辺りまで腕全体を包み込み、じんわりと温めます。



肩に羽織るように身につけて、上半身からやさしく体を温めます。

※蒸気と温熱はイメージです。


健やかな「天然素材」の「ウルモ」におまかせ。

『植物性炭素纖維』をはじめ『天然サンゴ砂』や蒸気温熱のやさしさで体を芯まで温めます。

遠赤蒸しマット
ULMO
ウルモ

『植物性炭素纖維』の遠赤外線で「温める」

纖維を炭化することで表面積を増やし、その作用を炭以上に高めた天然素材が『植物性炭素纖維』です。

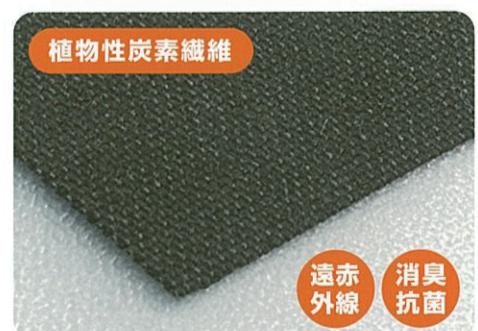


■炭素パワー「遠赤外線」

植物性炭素纖維から放射される高い放射率の遠赤外線で、体の芯までしっかりと温めます。




※マットの表面温度を39°Cに統一し、皮膚の温度変化をサーモグラフィにて測定。(検査機関:名古屋市工業研究所)

■植物性炭素纖維の「遠赤外線放射率」

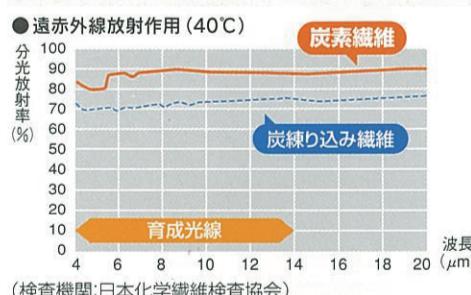

遠赤外線で温まる メカニズム

遠赤外線の中には育成光線(4~14 μm)と呼ばれる波長域があります。育成光線は水などの特定の分子に吸収されやすく、育成光線を吸収した分子は振動(共鳴振動)を始めます。

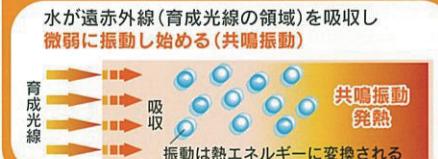

■消臭・抗菌能力を持つ纖維

植物性炭素纖維は炭の約4倍もの表面積があり、消臭・抗菌能をもち合わせています。



(検査機関:大阪府立産業技術総合研究所)

天然サンゴ砂で「和らぐ」


「生命のミネラル源」とも言われる天然サンゴ砂で、体にやさしい温熱を均一に伝えます。



■マット全体を均一に温かく

マット全面に『サンゴ砂』を配置することで、ムラなく均一に温熱を伝えます。

熱拡散イメージ図

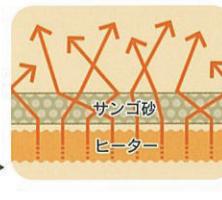


■「サンゴ砂」の重みが体にフィット

体に寄り添うようにマットがフィットして心地よく体を温めます。

蒸気温熱の「うるおい」

特殊吸湿構造で空気中の水分を吸収し、温熱によって水分を発散。蒸すような蒸気温熱で、やさしく体を温めます。

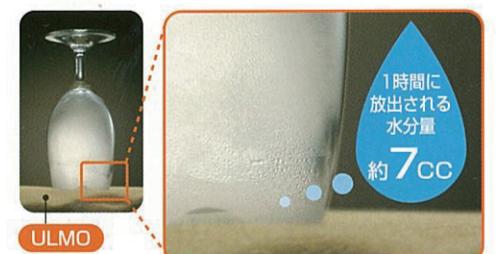


室内環境: 温度20°C / 湿度60% ULMO設定温度65°C (検査機関:名古屋市工業研究所)

*ご使用時間や設定温度、又はご使用場所の温度や湿度により放出される水分量は変動します。

■低温でも効率よく温まる

水分を発しながら、やさしく温熱を伝えることで、低温でも効率よく体が温まります。

■ULMO構造図

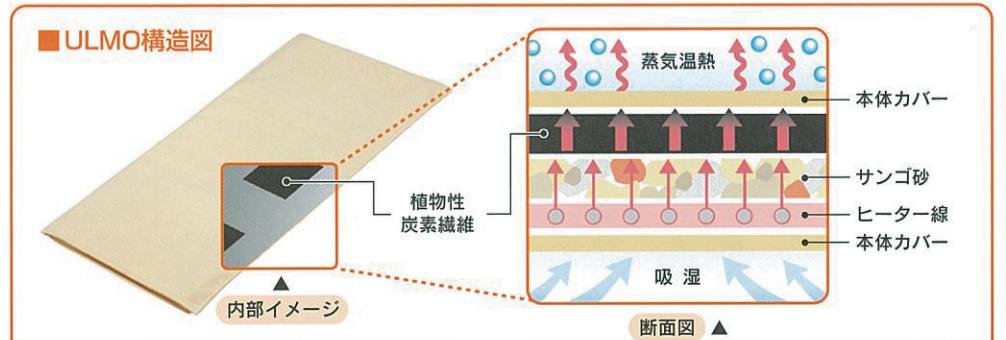

■仕様

販売名	遠赤蒸しマットULMO(標準仕様)
型番	ULM-H1502-N
質量	約1.6kg
外形寸法	約720×380×15mm(本体カバー装着時、コード除く)
電源	本体 AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	210W
設定温度	45~65°C
タイマー時間	15分、30分、45分、60分
電源コード長さ	約1.35m(コントローラー接続部分から電源プラグまで)
コントローラーコード長さ	約0.52m(コントローラー接続部分から本体接続部分まで)
原産国	台湾
価格	38,880円(税込)



■シンプルかんたん操作

大きめのボタンと表示で操作もかんたん。設定温度は低温45°C~高温65°Cまで1°Cずつ調節可能。



■マットカバーは丸洗い可能

お財布も安心
電気代は1時間あたり約4.6円。
※新電力料金単価22円／1kWh(税込)で計算しています。

■コンパクトで持ち運び便利
電源オフで折りたたみも可能。
手軽に持ち運べて収納もかんたん。

本品の性能向上のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●次の方は必ず医師とご相談のうえご使用ください。医師の治療を受けている方や特に身体に異常を感じている方／血栓症(血栓・重度の動脈りゅう[瘤]・急性静脈りゅう[瘤])・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮膚組織の炎症を含む)などの方／伝染病疾患の方／心臓に障害のある方(狭心症、心筋梗塞などの疾患のある方／ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の方／妊娠中や出産直後、生理中の方・妊娠の可能性のある方／糖尿病などによる高度な末梢神経障害による知覚障害のある方／悪性腫瘍のある方／安静を必要とする方／急性症状のある方／かつて治療を受けたところまたは患部へ使用する方／体温38°C以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血压変動など]の強い時期、衰弱しているとき)／布製品でかぶれたことのある方／温度感覚喪失が認められる方／低温やけどをしたことのある方／上記以外に身体に異常を感じているとき
※上記の内容を守られない場合、事故や体調不良をおこすことがあります。

●使用中に気分が悪くなったり、身体に異常や苦痛を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

●本品を誤ってご使用されますと、低温やけどを起こす可能性があります。お使いになるまえに、取扱説明書の中の「低温やけどについて」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●本品に万一故障などが発生した場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、又は(株)MTGお客様ご相談センターまでご連絡ください。

●本品は日本国内仕様であり、海外での使用を前提に製造しておりません。

●製品の仕様・デザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●撮影、印刷物条件によりカタログに記載している製品の色調が実物と異なることがあります。

●このカタログの記載内容は2009年12月現在のものです。

お問い合わせ先

【製造元】株式会社MTG