



取扱説明書

型番 EMS3500-50

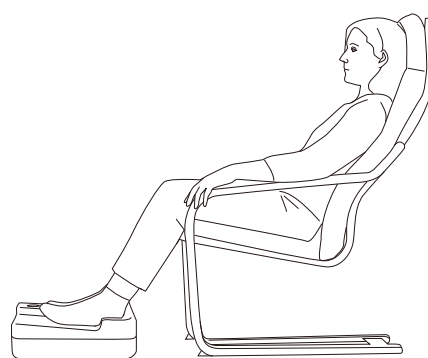

リーズ オアシス 100

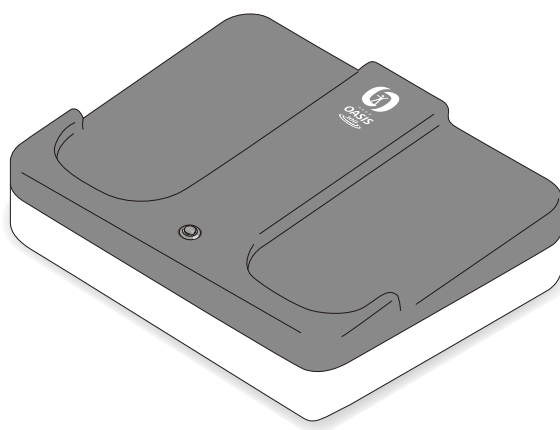

目次

⚠ 安全上のご注意.....	2・3	👉 ご使用方法.....	6
⚠ 製品注意事項.....	4	⚙ 製品仕様.....	7
📋 製品概要.....	5	♡ 保証書.....	8

取扱説明書

この度はREEZオアシス100をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

- ・ 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。
- ・ この取扱説明書には、保証書が付いています。保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・ 本製品を他の人に貸したり、譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用いただく中で、取扱説明書等に不明な点がございましたら、お客様相談室までお問い合わせください。

⚠ 安全上のご注意

(必ずお守りください)

ご使用前には必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

■誤った使い方をする時に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 危険	取扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れが大きい内容を示しています。
⚠ 警告	取扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受ける内容を示しています。

🚫 禁止	記号は禁止の行為であることを示しています。
❗ 注意	記号は注意しなければならない内容を示しています。

⚠ 危険 < 事故や体調不良などを防ぐために >	
🚫 禁止	■ 次のような医用電気機器の併用は、絶対にしないでください。事故や医用電気機器の誤作動を招き、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。 (1) ペースメーカー、埋め込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内埋込型医用電子機器 (2) 人工心肺等の生命維持用医用電気機器 (3) 心電計などの装着型の医用電子機器 ■ 他の治療器と同時に使用しないでください。急激な刺激がかかったり、事故や故障の原因となります。(時間をずらしての使用はできます) ■ 次のような人は、使用しないでください。 (1) 高度な抹消循環障害による知覚障害のある方 (2) 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている方 (3) 温度感覚喪失が認められる方 (4) 乳幼児(6歳以下) (5) その他、医師が不適當と認めた方



安全上のご注意

(必ずお守りください)



警告

〈 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの 〉

必ず守る

■ 次のような方は必ず医師にご相談の上使用してください。

- (1) 悪性腫瘍のある方
- (2) 急性(疼痛性)疾患の方
- (3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- (4) 心臓に障害のある方
- (5) 熱の高い方(38℃以上)
- (6) 血管障害の恐れのある高血圧の方
- (7) 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の方
- (8) 安静を必要とする方

■ 1時間以上使用する場合、次の方は医師と相談の上使用してください。

- (1) 高血圧の方
- (2) 不整脈のある方
- (3) 睡眠時無呼吸症の方
- (4) 喘息の方

■ ご自分で分解や改造はしないでください。感電事故、故障の原因となります。

■ 乳幼児や子どもの手の届かないところに保管し、使用させないでください。

■ 次の方は、取り扱える人が必ず付き添って使用してください。

- (1) 起居動作の困難な高齢者、子供、知覚障害の方
- (2) 取扱説明書の内容を理解できない方

■ 泥酔している方や睡眠薬を服用された方は絶対に使用しないでください。事故の原因となります。

■ 日常の健康管理以外の目的には使用しないでください。事故や故障の原因となります。

■ 慣れるまでは慎重に

使用当初、人によっては電気の刺激に強く反応することがあります。比較的、低血圧・貧血症や虚弱体質の方に多く、倦怠感・頭痛・めまい・ふしぶしの痛みなどを訴えることがあります。反応を避けるために、徐々に体を慣らして、少しずつ時間を延長してってください。



警告

〈 故障、事故、火災、感電、漏電の原因になります 〉

禁止

- 設置や調節は、正しく行ってください。転倒事故や火災、けがの原因となります。
- 水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。感電事故や火災の原因となります。
- 本体の上に乗る行為、踏み台やストレッチのために使用する行為をしないでください。
(必ずイス等に座った状態でご使用ください。)
- イスや机など金属製のものは絶対に使用しないでください。また、足下絶縁を高めるために靴下を履いて使用してください。
- 間違った使用や乱暴な取り扱い、あるいは負荷をかけた状態での長年の使用は、コードの断線などにより火傷・火災など思わぬ事故の原因となることがあります。



製品注意事項

⚠ 注意 〈ケガ、感電、故障、ショート、火災の原因になります〉



- 当製品の上に金属類(クリップ、ヘアーピン、針金等)は決して置かないでください。静電気のような突然の電撃が走る場合があります。
- 当製品の隙間に金属類(クリップ、ヘアーピン、針金等)を差し込まないでください。感電の原因となります。
- 濡れた手で、機器や電源プラグを触らないでください。感電の原因となります。 
- ペット及び動物には使用しないでください。コード類や電床などへの噛みつき、引っかきや尿をかける等により、故障の原因となる恐れがあります。
- 電床が尿・水などで濡れた場合、効果がないばかりか、感電・火災の恐れがありますので使用しないでください。十分に乾燥させてから使用してください。ただし、ドライヤーを使用したり、ストーブにあてるなどの無理な乾燥はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 電源コードの上に物を置く、加工する、傷つける、折り曲げる、ねじる、引っ張る等のことをしないでください。コードが損傷し火災や感電事故の原因になります。
- 当製品の電源スイッチを入れたまま、当製品の上でノートパソコンや携帯電話等の充電はしないでください。
- 電源コードを繋いだまま使用する電気機器などは使用しないでください。
- 高温になる場所(ストーブの上等)、またはその近くで使用しないでください。製品の変形、故障、火災の原因となります。
- 車内では使用しないでください。車体に触れた時に静電気のような電撃を受ける場合があります、運転に支障をきたし、予期せぬ事故を招く恐れがあります。
- この製品は屋外で使用しない。屋外でご使用になりますとサビ、故障、感電事故の原因となります。
- 機器に異常がある場合、すぐに電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。放置しますと火災の原因となります。
- 温度、湿度の高い所、直射日光の当たる所、ほこりの多い所では保管しないでください。劣化を早め、事故や故障の原因となります。




- 本製品の使用により気分が悪くなったり、発疹、かゆみなどの症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 電源プラグを抜き差しする場合、必ず電源スイッチをOFFにして行ってください。ONにしたまま抜き差しするとショートや感電、火災の原因となります。 
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って行きます。コードを持って引き抜くとショートや感電、火災の原因となります。 
- 長期間使用しない場合は電源コードをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- 機器の表面が汚れた時は、電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いて、柔らかい布で拭き取ってください。



製品概要

商 品 名	REEZ オアシス100
型 番	EMS3500-50
商 品 概 要 及 び 機 能	身体全体に電磁界を形成し、安定的に継続させる装置

【各部の名称・付属品】

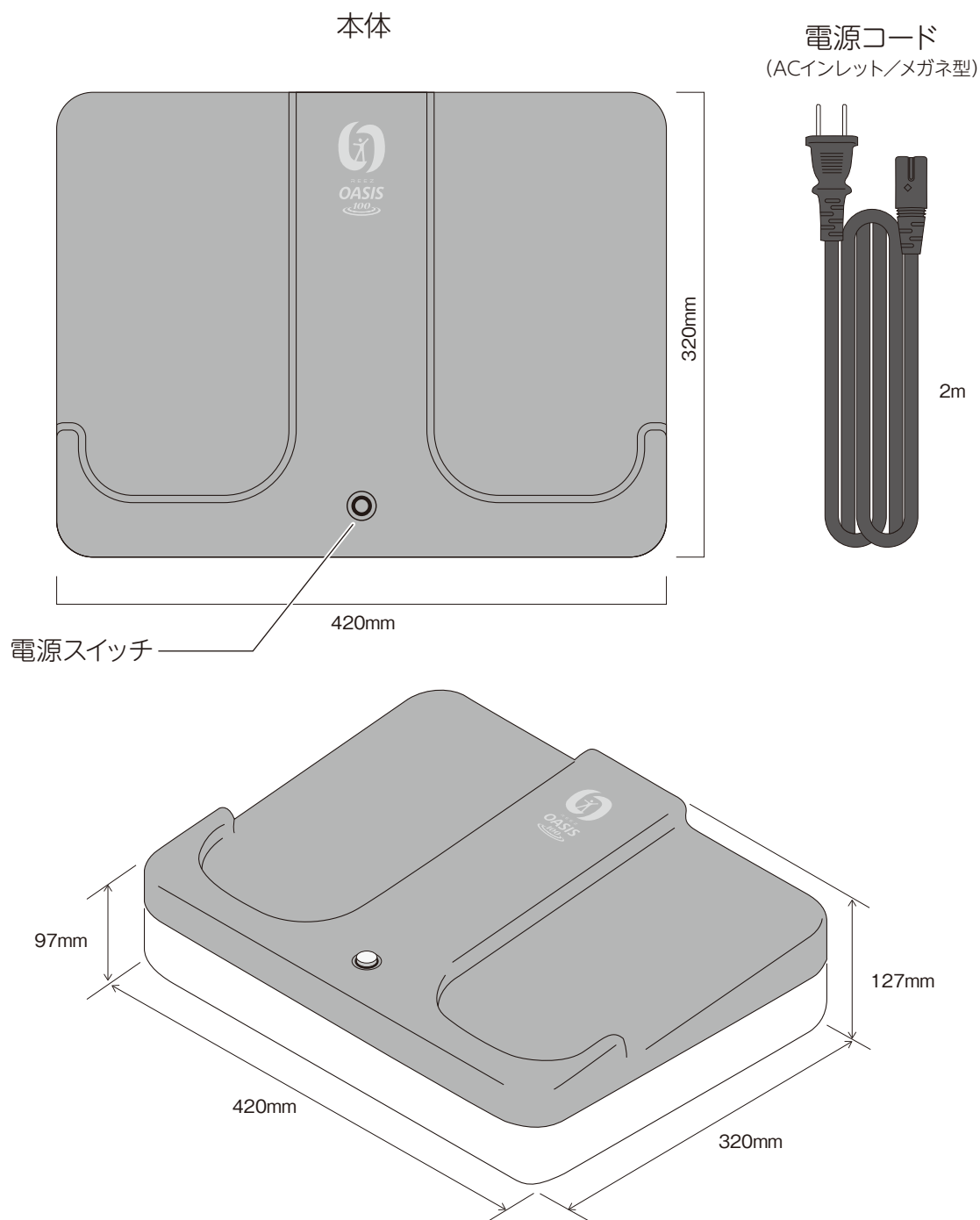


※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。



ご使用方法


タイマー機能付き

1日1回30分を目安にご自身の体調にあわせて使用時間を調整してください。

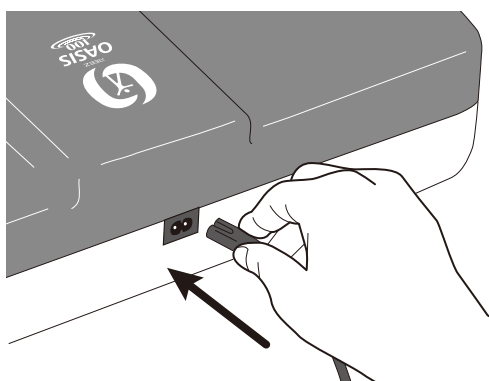


1

電源コードの(メガネ)コネクターを当製品に差し込み、電源プラグを100V(50/60Hz)のコンセントに接続してください。

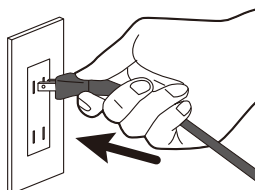

2

当製品の電源スイッチをONにし、青色LEDランプの点灯を確認してからご使用ください。

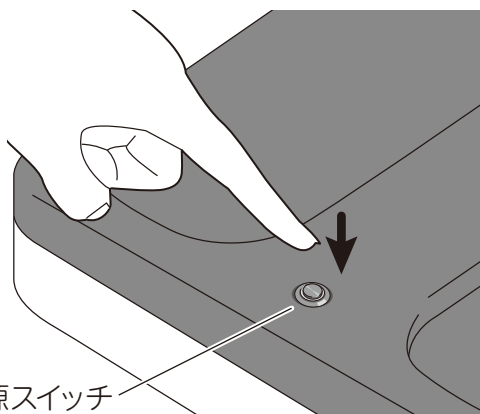

電源スイッチ


3

電源スイッチON後、30分経過すると青色LEDランプは消灯し、動作は停止します。


動作停止

スイッチON

動作停止

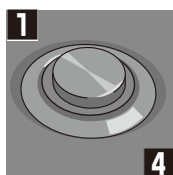

スイッチが
上がった状態

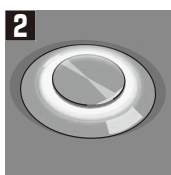


スイッチが
下がった状態
青く点灯



スイッチが
下がった状態
消灯

4

電源スイッチを押して、電源スイッチをOFFにしてください。

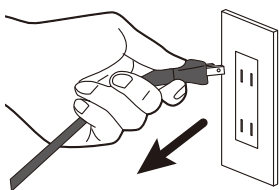

5

ご使用後は、電源プラグを100V(50/60Hz)のコンセントから抜いてください。

！注意 お一人で複数回連続で使用しないでください。 靴下を履いてご使用ください。




製品仕様

区 分	項 目	仕 様
製品型番		EMS3500-50
電気特性	入力電圧	AC100V±10%(50/60Hz)
	出力電流	1.5mA以下
	出力電圧	3500V
	消費電力	3W
外観特性	本体重量	3.1kg
	外形寸法	縦32cm×横42cm×高さ13cm
	電源コード	2m
	電源スイッチ	AC100V±10%、青色LED付スイッチ




【使用例】

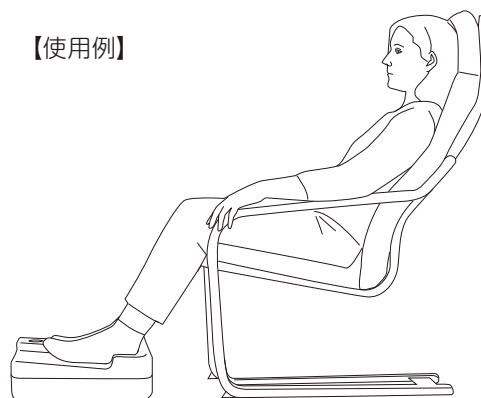


【付属消耗品について】


リーズオアシス100には下記のアイテムが付属しています。※
詳しくは別紙リーズオアシス100付属消耗品説明書をご参照ください。

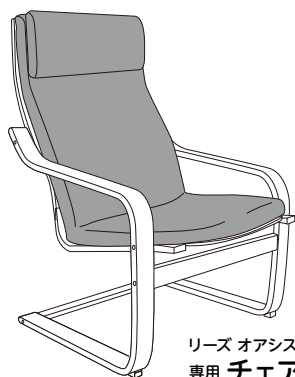

リーズ オアシス 100
専用 **チェアー**

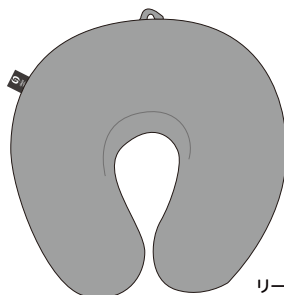

リーズ オアシス 100
専用 **ネックピロー**

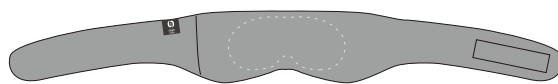

リーズ オアシス 100
専用 **アイマスク**

※上記は付属消耗品の一部です。付属消耗品品の種類・数・デザインは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※上記の付属消耗品は、使用していくうちに劣化や損傷が進み、交換が必要になるため、保証の対象外となっております。

保証書

【製品保証規定】 ※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

型番	EMS3500-50		
お買上げ日	年 月 日	製造番号	
保証期間	お買上げ日から 1 年		
販売店	ご住所		
	担当者名	様	
	お電話		
お客様	ご住所		
	お客様名	様	
	お電話		
製造元	株式会社Ele Mag Lab. 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-4-10 Quaranta 1966 403号室 Mail: k.omura@elemag-lab.co.jp		

1. 保証期間内に取扱説明書に従って正常な使用状態で故障した場合には、商品と本保証書をご持参の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理を行います。
2. その他の理由で修理が必要な場合は、直接下記お客様相談室までご連絡ください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書の再発行は行いませんので、紛失及び破棄されないよう大切に保管してください。

【保証期間内でも次の場合には有償修理になります】

- | | |
|--|--|
| (1) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷 | (5) 本書の提示がない場合 |
| (2) お買上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷 | (6) 本書にお買上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合 |
| (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷 | (7) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷 |
| (4) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷 | (8) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障及び損傷 |

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店、または弊社お客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

【免責事項について】 火災、地震、暴動、テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

販売元



株式会社 高陽社

お客様相談室 Tel.042-313-3021

メールアドレス: soudan@koyo-sha.jp

10:00 ~ 17:00 (土日祝日除く)

お客様相談室における個人情報のお取り扱い

株式会社高陽社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。